





Kaplamalı Alman Lensler

Germany Schott lensler çok katlı ve anti-reflektiftir.



VarioDist Lens

Çalışma mesafenizi mikroskobu yukarı veya aşağı hareket ettirmeden 190 mm - 300 mm aralığında ayarlamanızı sağlar.




Geniş göz mercekleri

Geniş göz mercekleri, gözlükleriyle çalışmak isteyen diş hekimleri için mükemmel bir şekilde uygundur. Mikroskop üzerindeki merceklerle uyumludur.



6 aşamalı büyütme

Her vaka için uygun yakınlaştırmayı ayarlama kontrolü

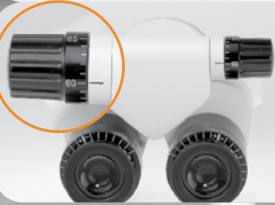

PD Ayarlayıcı

Hekimlerin kendi gözbebeği ayarlarını hızlı ve uygun yapabilmeleri için tasarlanmıştır.



Dengeleme kolu

Dengeleme kolu, harici bir kamera takıldığında dahi, mikroskobun yeniden konumlandırılması sırasında ultra yumuşak, akışkan ve mükemmel dengeyi garanti eder.



0 – 180 ° ayarlanabilir binoküler tüp

Kullanıcı konforu için istenilen en geniş mesafeye kadar ayarlanabilen binoküler ayarlayıcı.



Sarkaç Fonksiyonu

Bu fonksiyon, binoküler kafa yönünü değiştirmeden optik bölmenin yönünü değiştirerek kullanıcının dik bir izleme konumunda kalmasını sağlar.



WirelessST kablosuz pedal kontrolü (SLR kamera)

Titreşim ve kontaminasyon problemlerini engellemek için kameraya dokunmadan görüntü almanızı sağlar.




Lazer Filtresi

Diode, Nd-YAG ve Er-YAG lazerlerin ışınlarından göz retinasını korumak için tasarlanmıştır.



Dual Iris Diagram

Dual iris diyagramı, alan derinliğini arttırmak için kullanılır.

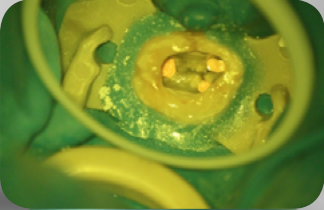

Sarı filtre:

Kompozitin erken polimerize olmasını engeller.



Yeşil filtre:


Doku ve kan akışının olduğu yerlerdeki görüntünün detaylarını görmenize yardımcı olur.



Görüntü Ayırıcı
20 % : 80 % - 50 % : 50 %



**Binoküler Uzatici
ve Görüntü Ayırıcı**
20 % : 80 % - 50 % : 50 %

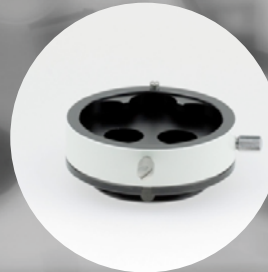

**Binoküler Döndürme
Halkası**



Kamera Adaptörü



**Video Kamera
Adaptörü**



Flaş Adaptörü



VarioDist Lens



Binoküler Uzatici



Easy360 Akıllı telefon adaptörü

- Mikroskop altındaki görüntüleri kaydederek sosyal medya için kullanmanızı sağlar.
- Canlı olarak vakalarınızı paylaşabilirsiniz.
- Iphone ve Android model akıllı telefon seçeneği mevcuttur.



DSLR Kamera İçin Flaş Adaptörü

F=250mm lens ve 12.5x mercek için büyütme değerleri

Büyütme Aşaması	0.3x	0.5x	0.8x	1.2x	2.0x	3.0x
Büyütme	2.8x	4.2x	6.9x	10.4x	17.0x	25.6x
Görüntü Alanı (mm)	78	52	32	21	13	9

Zumax Dental Operasyon Mikroskobu Teknik Donanım

	Standart	Full HD	3D
6 aşamalı büyütme	✓	✓	✓
Çok katmanlı lens (Germany Schott®)	✓	✓	✓
0° - 180° ayarlanabilir binoküler tüp	✓	✓	✓
25° sağ - sol eğim kabiliyeti	✓	✓	✓
Ayarlanabilir pupil mesafesi	✓	✓	✓
F250 mm objektif lens	✓	✓	✓
VarioDist objektif lens ile 190 mm ile 300 mm arasında ayarlanabilir çalışma mesafesi	O	O	✓
120° ayarlanabilen denge kolu	✓	✓	✓
Genişletilmiş oküler (x12.5)	O	O	✓
Yeşil ve sarı renk filtresi	✓	✓	✓
Şiddeti ayarlanabilir LED ışık kaynağı	✓	✓	✓
Dönebilen el tutacakları	✓	✓	✓
Entegre full HD kamera	X	✓	X
Entegre 3D kamera	X	X	✓
30° binoküler uzatıcı ve görüntü ayırıcı	O	O	✓
Binoküler için döndürme halkası	O	O	O
Dual iris diyafram	O	O	O
Lazer filtresi	O	O	O
DSLR kamera adaptörü	O	O	O
Akıllı telefon adaptörü	O	O	O
Video kamera adaptörü	O	O	O
Flash adaptörü	O	O	O
Dahili DSLR kamera güç adaptörü	O	O	O
Dahili video kamera güç adaptörü	O	O	O
WirelessST Shutter ayak pedalı kontrolü ile görüntü alabilme	O	O	O
Taşınabilir yer standı	✓	✓	✓
Sabit yer standı	O	O	O
Duvar standı	O	O	O
Tavan standı	O	O	O

O=Opsiyonel, X=Bulunmuyor