



oncu endo


Katalog

2017-2018

Online Katalog için



Oncu Dental IOS App

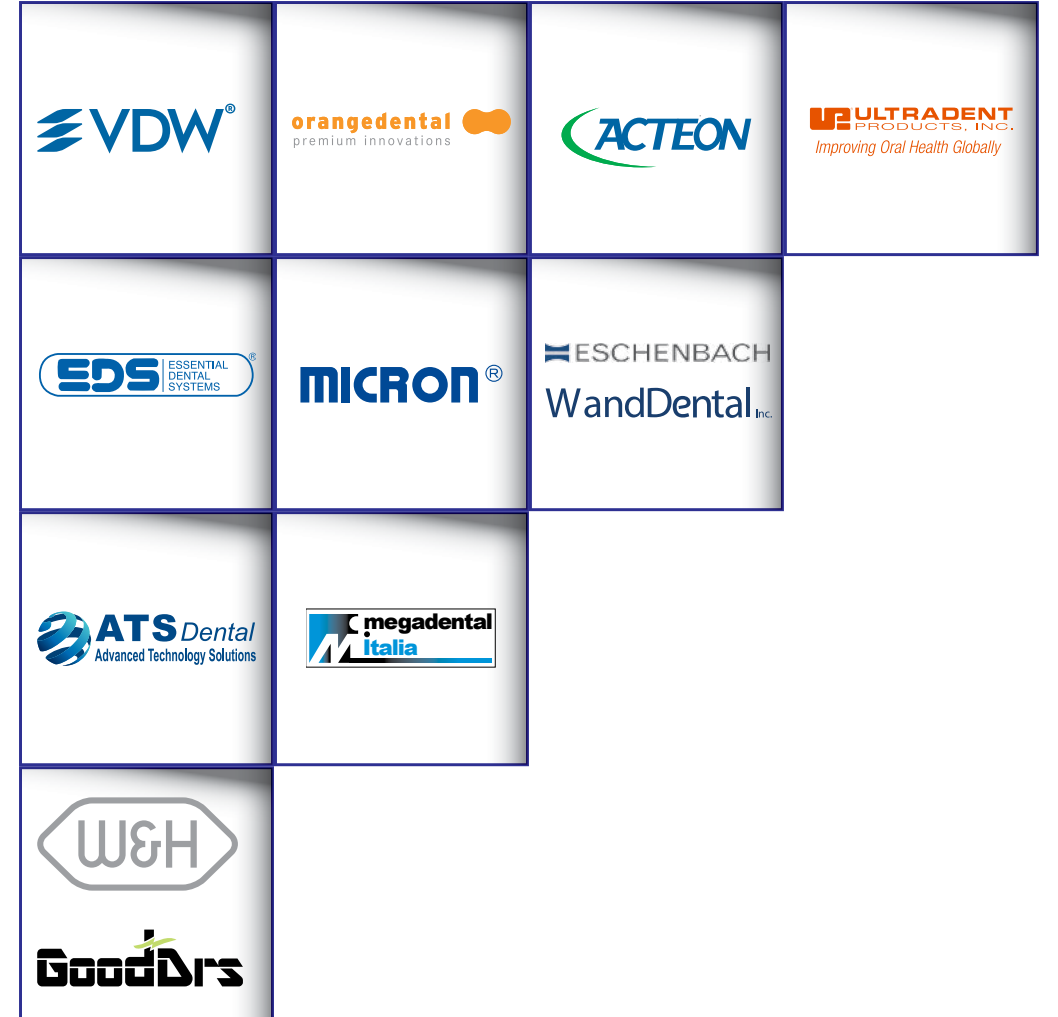



WandDental Inc.

Ağrısız Tek Diş Anestezisine Modern Yaklaşım



the Wand®



2.7x – 3.3x



Hafif

- Dünyanın en hafifi. Sadece 32 gr.



Ergonomik


- Ayarlanabilir çerçeve ile her zaman en ideal görüntü açısını seçebilirsiniz.



Vario Clips

Ayarlanabilir çalışma mesafesi

- Değiştirilebilen VarioClipsler ile çalışma alanınızı 30 ve 50 cm arasında değiştirebilirsiniz.
- VarioClipsler ışığı yansıtmaz ve gözü yormaz.

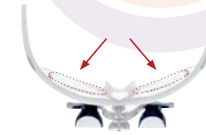

Gözlük kullananlar için

- Reçete adaptörü sayesinde, +/- 3 aralığındaki camlar loupe takılabilir.



spot-on^{nxt}
Işık kaynağı

Sadece
7 gr.

CRI 90





maxDETAIL


- Asferik PXM ® hafif lens ile keskin görüş açısı ve kolay çalışma sağlar.
- 2x büyüme
- Ağırlık: 49 g.
- 58-68 mm geniş PD serisi
- 40 cm çalışma mesafesi
- Dioptri: 3 DPT ±, sağ / sol bağımsız olarak ayarlanabilir.

headlight LED



ridoMED

2.5x

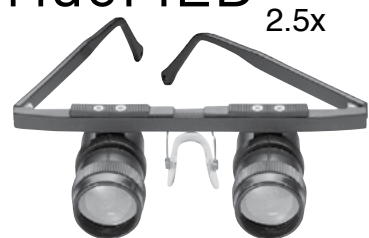

- Kaplamalı lens sistemi.
- Yüksek kaliteli silikattan yapılmış renksiz mercek.
- 54-74 mm pupil mesafesinin ayarlanması.
- Mercek çapı 23 mm.
- Odaklanma / dioptri kompozasyonu her göz mercek için ayrı ayarlanır.
- Oküler yan ek düzeltme mümkündür.
- Cam elyaf takviyeli, siyah plastikten sağlam taşıyıcı çerçeve.
- Rahat, kolayca ayarlanabilen eyer köprüsü.

maxDETAIL Clip

100
YEARS OF INNOVATION

Gold® RECIPROC



- Hafızada kayıtlı 15 program.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Yalnız apex bulucu olarak çalışma özelliği
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı ASR Angldruva.
- Sarjdayken çalışma özelliği

Entegre, mükemmel apex bulucu

- Çalışırken simultane kanal boyu tespiti veya sadece apex boyu tespiti.
- Apexe ulaşınca otomatik stop.
- Eğe durumunun LED ekranda sürekli gösterilmesi.
- X ışını kullanmadan güvenilir kanal boyu tespiti.

Entegre, apex locator'lı yüksek kaliteli angulduruva

- Kolay görüş çalışması için küçük kafa.
- Kolay eğe takma klibi
- Çabuk eğe değişimi.



Fonksiyonel kontrol paneli

ANA Zor kanallarda tork limitini düşürerek güvenliği artırır.

ASR Tork limitine gelince otomatik stop ve tersine dönüş.

MENU Basit ve pratik menü seçimi.

CAL Steril edilmiş el parçasının kalibrasyonu.

Silver® RECIPROC



- Şarj edilebilir.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Tork ve devir ayarlı.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Angldruva.

Kullanıcı dostu

- Güvenli operasyon için tork kontrolü.
- 5 Farklı NİTİ sistemi için geniş tork kapsamı.
- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilme.
- Sesli uyarı sistemi.


Yedek Parçalar VDW Gold ve Silver Reciproc için

Ürün


- Angulduruva
- Angulduruva Silikon Kılıf
- Dudak Klipsi
- Eğe Klipsi
- Dudak Klipsi Kablosu Klipsi ile
- Kanal Ölçüm Kablosu
- Şarj Cihazı
- Ayak Pedalı



Yalnızca bir düğmeye basarak Genius motor, contra-angle ve eğeler size hem resiprokal hem rotary hareket sağlar.

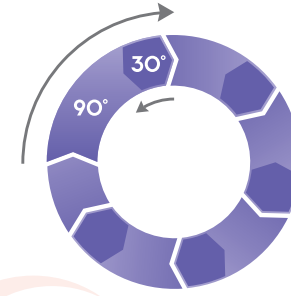

VEYA

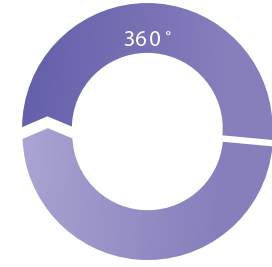

RESİPROKASYON
SAAT YÖNÜNDE VE SAATİN
TERS YÖNÜNDE İLERİ GERİ
HAREKETİN GÜVENLİLİĞİ

ROTARY
DÖNER HAREKETLE KALINTILARI
UZAKLAŞTIRMADAKİ ETKİNLİK

- Endo-Eze™ Genius® eğeler için önceden programlanmış ayarlar mevcuttur
- Resiprokasyon ve rotary hareket arasında kolayca geçiş yapılır
- Rotary hareket modunda tork kontrollü Auto Reverse özelliğine sahiptir
- Değişken contra-angle redüksiyon oranları özelliği mevcuttur
- Açık sistem yazılıma sahip Ultradent Genius tüm resiprokasyon açılarında (Saat yönü ve Saat yönünün tersi) çalışabilme özelliğine sahiptir.



entran



- Kablosuz Endo konforu! Kablo yok.
- W&H, Entran ile kök kanal hazırlığı için kablosuz başlıktaki kolaylığı sunuyor.
- Entran titiz, sağlam ve güvenli çalışma sağlar.
- NiTi egeler için kablosuz Endo motoru – tamamen hareket serbestisi 300 rpm (devir), 5 tork seviyesi (0.5 / 1 / 1.5 / 2.5 / 4 Ncm)
- »otomatik ters dönüş« / »otomatik ileri« modları
- Kolay kullanım
- Uzun ömürlü, tekrar şarj edilebilir batarya (Li-ion)

Uzun ömürlü
ve
tekrar şarj edilebilir
batarya



Tork Kontrolü



Otomatik ters dönüş« / »otomatik ileri« modları



Küçük Kafa



Hızlı Eğe ve Başlık Değişimi



İster saat yönü ister saat yönü tersine simetrik veya asimetrik resiprokasyon yapabilen açık sisteme sahip yeni nesil endo-motor.

Tüm eğe sistemlerini tek bir cihaz üzerinden kullanmak mümkündür.

Rotating

Prg: 1

Rpm: 300

R/R: 20:1

Ncm: 2.5

REV: SAR

Mode

Rotating

F+R

Motor

On

Off

Ratio

16:1

Speed

+

-

Program

P

Calibr.

←

Fwd/Rev

+

-

RevType

+

-

Torque

+

-

FWD*

+

-

REV*

+

-

F+R

Prg: 1

Rpm: 300

R/R: 20:1

FWD°: 180

REV°: 90

Mode

Rotating

F+R

Motor

On

Off

Ratio

16:1

Speed

+

-

Program

P

Calibr.

←

Fwd/Rev

+

-

RevType

+

-

Torque

+

-

FWD*

+

-

REV*

+

-



5 farklı anguldruva redüksüyonu
(1:1 - 6:1 - 16:1 - 20:1 - 32:1)



Hız seçenekleri
1000 - 10000 rpm

Hız
16:1 anguldruva = 100 - 600 rpm
6:1 anguldruva = 150 - 1600 rpm



Tork
16:1 anguldruva = 0,5 to 10 Ncm (Max)
6:1 anguldruva = 0,5 to 4,1 Ncm (Max)



Ayarlanabilir Resiprokasyon hareket modu :
10° - 360° açıları arasında, saat yönü ve saat yönünün tersinde ayarlanabilir.

Dr's Finder NEO



- Dünyanın en küçük apex bulucu cihazı
- Hassas ölçüm için 3 frekans özelliği
- Manuel kalibrasyon yapılabilir
- Çalışma uzunluğu seçimi
- USB ile şarj edilebilme
- Dokunmatik ekran
- 3 farklı çalışmayı kaydedebilme özelliği
- Ayarlanabilir zaman özelliği

VDW®
Raypex 5



Güvenilir ve kesin sonuç

- Apikal bölümün yapısını gösteren büyütülmüş görüntü
- Her kullanımda kalibrasyon gerekmez
- Kanal eğesinin tüm kanal boyunca hareketinin canlı olarak izlenmesi
- Multi- frekans sistemi ile alternatif akımlı ölçüm

Kullanıcı ve hasta dostu

- Kolay kullanılabilen menü
- Katlanabilir ekran ile opsiyonel çalışma açısı
- Yeniden doldurulabilen AAA Piller
- Pil doluluk seviyesi göstergesi
- Net sonuçlar için hasta demo programı

C-Pilot Files



Döner alet kullanımı öncesi kanalın hazırlığında

- Paslanmaz çelik, CC+ Sap
- Özel bir termal sertleştirme işlemi nedeniyle yüksek bükme gücü
- Eğe kullanımı öncesinde pürüzsüz bir kaygan çalışma yüzeyi oluşturulmasını sağlar
- İnaktif Pilot Uç (Keskin Olmayan), ensturmanın kanal boyunca güvenli ilerlemesini sağlar
- Kavisli ve kalsifiye kök kanalları için uygun
- Radyopak derinlik işaretleri
- Iso renk kodlaması



VDW® STERILE

Size		19 mm	21 mm	25 mm	
06	●	0368 019 006	0368 021 006	0368 025 006	
08	●	0368 019 008	0368 021 008	0368 025 008	
10	●	0368 019 010	0368 021 010	0368 025 010	
06-10		0368 019 210	0368 021 210	0368 025 210	
12.5	●	0368 019 012	0368 021 012	0368 025 012	
15	○	0368 019 015	0368 021 015	0368 025 015	

Two Retreatment Files



Dolgu maddelerinin etkili şekilde çıkarılması için özel dizayn

- Kolay ilerleme için kesici uç
- Ekstra basınç uygulamadan dolguya girmesini sağlayan aç

Retreatment files

Blister of 6 instruments

Size/Taper	21 mm
R 15/.05	○ 0232 021 015
R 25/.05	● 0232 021 025
3 x R 15/.05, R 25/.05 each	0232 021 022



Dar Kanallar İçin Geniş Kanallar İçin



15/.05



25/.05

VDW®STERILE Flexicut® Files

Size	21 mm	25 mm
15	V04 0364 021 015	V04 0364 025 015
20	V04 0364 021 020	V04 0364 025 020
25	V04 0364 021 025	V04 0364 025 025
30	V04 0364 021 030	V04 0364 025 030
35	V04 0364 021 035	V04 0364 025 035
40	V04 0364 021 040	V04 0364 025 040
15-40	V04 0364 021 230	V04 0364 025 230



VDW®STERILE Root Filler “LENTULO”

Size	21 mm	25 mm
25	V04 0393 021 025	V04 0393 025 025
30	V04 0393 021 030	V04 0393 025 030
35	V04 0393 021 035	V04 0393 025 035
40	V04 0393 021 040	V04 0393 025 040
25-40	V04 0393 021 290	V04 0393 025 290



VDW®STERILE Barbed Broaches “TIRNEF”

Size	21 mm
XXXXF / 0	V04 0333 021 410
XXXF / 1	V04 0333 021 420
XXF / 2	V04 0333 021 430
XF / 3	V04 0333 021 440
F / 4	V04 0333 021 450
M / 5	V04 0333 021 460
C / 6	V04 0333 021 470
XXF-F / 2-4	V04 0333 021 480

Kendo®
HEDSTROM FILES

Size/ISO	21 mm	25 mm	31 mm
008	V20 0707 021 008	V20 0707 025 008	V20 0707 031 008
010	V20 0707 021 010	V20 0707 025 010	V20 0707 031 010
015	V20 0707 021 015	V20 0707 025 015	V20 0707 031 015
020	V20 0707 021 020	V20 0707 025 020	V20 0707 031 020
025	V20 0707 021 025	V20 0707 025 025	V20 0707 031 025
030	V20 0707 021 030	V20 0707 025 030	V20 0707 031 030
035	V20 0707 021 035	V20 0707 025 035	V20 0707 031 035
040	V20 0707 021 040	V20 0707 025 040	V20 0707 031 040
045	V20 0707 021 045	V20 0707 025 045	V20 0707 031 045
050	V20 0707 021 050	V20 0707 025 050	V20 0707 031 050
055	V20 0707 021 055	V20 0707 025 055	V20 0707 031 055
060	V20 0707 021 060	V20 0707 025 060	V20 0707 031 060
070	V20 0707 021 070	V20 0707 025 070	V20 0707 031 070
080	V20 0707 021 080	V20 0707 025 080	V20 0707 031 080
008-010	V20 0707 021 220	V20 0707 025 220	V20 0707 031 220
015-040	V20 0707 021 230	V20 0707 025 230	V20 0707 031 230
045-080	V20 0707 021 240	V20 0707 025 240	V20 0707 031 240

K-FILES

Size/ISO	21 mm	25 mm	31 mm
006	V20 0706 021 006	V20 0706 025 006	V20 0706 031 006
008	V20 0706 021 008	V20 0706 025 008	V20 0706 031 008
010	V20 0706 021 010	V20 0706 025 010	V20 0706 031 010
015	V20 0706 021 015	V20 0706 025 015	V20 0706 031 015
020	V20 0706 021 020	V20 0706 025 020	V20 0706 031 020
025	V20 0706 021 025	V20 0706 025 025	V20 0706 031 025
030	V20 0706 021 030	V20 0706 025 030	V20 0706 031 030
035	V20 0706 021 035	V20 0706 025 035	V20 0706 031 035
040	V20 0706 021 040	V20 0706 025 040	V20 0706 031 040
045	V20 0706 021 045	V20 0706 025 045	V20 0706 031 045
050	V20 0706 021 050	V20 0706 025 050	V20 0706 031 050
055	V20 0706 021 055	V20 0706 025 055	V20 0706 031 055
060	V20 0706 021 060	V20 0706 025 060	V20 0706 031 060
070	V20 0706 021 070	V20 0706 025 070	V20 0706 031 070
080	V20 0706 021 080	V20 0706 025 080	V20 0706 031 080
006-010	V20 0706 021 210	V20 0706 025 210	V20 0706 031 210
015-040	V20 0706 021 230	V20 0706 025 230	V20 0706 031 230
045-080	V20 0706 021 240	V20 0706 025 240	V20 0706 031 240

M_{two} Files


Etkili NiTi Sistemi

- Preparasyondan obtürasyona kolay ve güvenli sistem
- Tüm kanallar için tek çözüm
- Simultane Şekillendirme: Fırçasal hareketle kullanıldığında apikal ve lateral olarak keser
- Her eğe bir sonraki için kayganlığı artırılmış bir yol hazırlar (Glide Path)
- Gereksiz dentin kaybını önler



S' Kesitli Özel Tasarım

- İki etkin kesici yüzeyi vardır
- Dentin parçacıklarının çıkışına imkan verecek radyal temas prensibi ile dizayn edilmiştir
- Gücünü düşürmeyecek şekilde maksimum esneklikle tasarlanmıştır

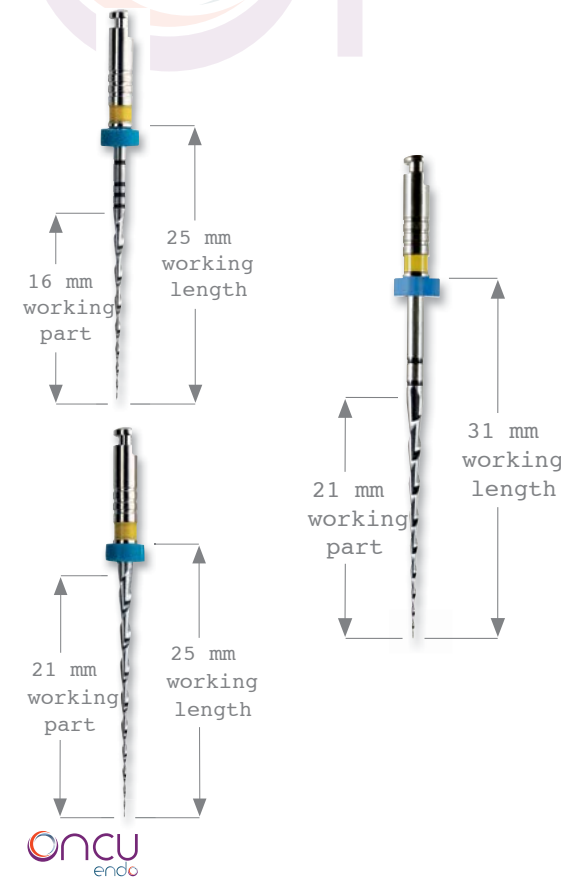

Video İçin

QR Kod

M_{two} TORQUE VALUES


M _{two}	gcm	Ncm	M _{two}	gcm	Ncm
10/04	120	1.2	25/07	200	2.0
15/05	130	1.3	30/06	120	1.2
20/06	210	2.1	35/06	100	1.0
25/06	230	2.3	40/06	170	1.7
30/05	120	1.2			
35/04	120	1.2			
40/04	160	1.6			
45/04	160	1.6			
50/04	200	2.0			
60/04	300	3.0			
All sizes: 280 rpm			Retreatment instruments		
			R15/05	30	0.3
			R25/05	120	1.2

Endo Eze Genius Eğeler

Resiprokasyon/Rotary Hareketli Eğeler



- Oyuklar saat yönünde kesim için tasarlanmıştır
- Eğeler resiprokal hareketin (90°/30°) güvenliğini ve rotary hareketin (360°) etkinliğini sağlar
- Preflaring yaptıktan ve bir kayma yolu oluşturduktan sonra herhangi bir prosedürü yalnızca iki eğe ile tamamlayın
- Hem tedavi hem retreatment için aynı işlem sırası kullanılabilir

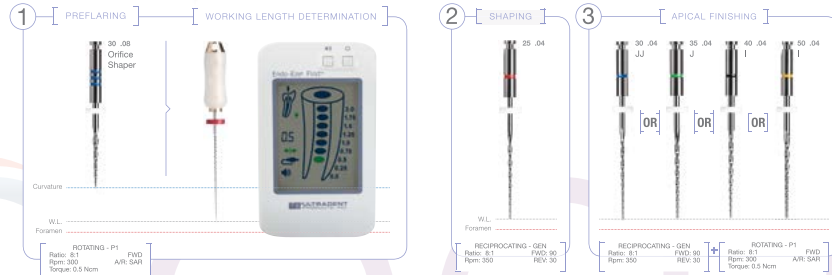

Tango-Endo™

Resiprokal Çalışma

- Resiprokal iki enstrümanla şekillendirebilme sistemi ile zaman tasarrufu.
- Dayanıklı ve tekrar kullanılabilir. Tango-Endo üç defaya kadar kullanılabilme özelliği ile diğer tek kullanımlık sistemlere göre önemli ölçüde tasarruf sağlar.
- Tüm uzunluk boyunca patentli düz yüzey iki dikey bıçakla kesim artışı yaratır ve apekse daha az dirençle ile hızlı ilerlemesi için angajmanı azaltır.
- Patentli düz yüzey güçten ödün vermeden enstrümanın esnekliğini artırır.
- Tango-Endo enstrümanları, enstrüman kırılmasını ve sıkışmasını ortadan kaldırmak için, Tango-Endo resiprok anguldurması için özel olarak dizayn edilmiştir.
- Kanal hasarını önler.
- Basit iki işlem ile uygulama tamamlanır.



5421-00 Tango Endo Başlangıç Seti

6 adet 25mm Tango-Endo kanal eğesi
(3 adet şekillendirme: 30/02 , 3 adet bitim: 30/04)
1 adet Tango-Endo resiprokal hareketli endodontik anguldurva
60 adet tam uyumlu guttapercha.

VDW File Care Edta



- Jel içeriği %15 edta ve %10 karbamid peroksittir.
- Smear tabakasını ve dentin atıklarının kanal dışına atılmasına yardımcı.
- Endodontik tedavi ve dolgu maddeleri için gelişmiş kanal penetrasyonu.
- Kanal içinde kalsiyum tuzlarını bağlayarak eğenin rahat hareket etmesine yardımcı olur.
- 5x3 ml

Kök Kanal Hazırlama Jeli

Salvizol



- %8'lik Edetic Asit solusyonu
- Edetik asit etkisi smear tabakası ve zararlı bakterilerin eliminasyonunu sağlar

Kök Kanal İrrigasyonu EDTA

Edebat



- Organik debrisin çözünmesine yardımcı olur.
- Edebat patolojik mineral maddelerin çıkarılmasını ve dar veya ulaşılması güç kanalların genişletilmesini sağlar.
- İçeriği sayesinde dentin duvarının iyi nemlendirilmesine yardımcı olur.
- Köpürme etkisiyle debrisin apex içinde sedimente olmasını engeller
- %14 Edta içerir.

Kök kanal preperasyonları için çözücü solusyon

Resosolv



- Piyasadaki en güçlü çözücü
- Akrilik bazlı dolguları etkili bir şekilde çözer

Fenol formalin esaslı kök kanal dolguları için çözücü solusyon

Hycal



- Tedavi seansları arasında bakteri üremesini önler
- Pulpotomi sonrası direk kapama olarak endikedir
- Derin çürüklerde indirek kapama olarak endikedir
- Kanal gelişimi tamamlanmamış bireylerde geçici dolgu materyali olarak kullanılır
- Radyoopaktır.Tüm dolgu ve kavite-linearları altında kullanılabilir
- 1X2ml

Kalsiyum hidroksit içerikli preperasyon ajanı, şırınga formu

Ultra-Blend Lineer



- Biyoaktif Liner ve pulpa kapatma materyali
- Yüksek kalsiyum salımı
- Kontrollü, kusursuz şırınga iletimi
- Karıştırma gerektirmez
- Zamanla çözünüp kaybolmaz
- Klinisyen hazır olduğunda ışıkla sertleştirilir
- Radyopak



UltraCal XS

%35 Kalsiyum Hidroksit Pati



- Radyopak
- Yüksek pH değeri 12.5
- %35 Kalsiyum Hidroksit patıdır.



Sable Seek

Kanal Bulucu



- Demineralize olmuş dentini belirler
- Etrafı kirlenmeden, tam miktarında iletim sağlar
- Pulpa yakınında çalışmak ve kök kanal girişlerini kolayca belirlemek için koyu yeşil renkte mevcuttur



Citric Acid 20% Solusyon



- Hazırlanmış kök kanallarında temizlik/bakım için önerilir
- Mineral ve smear tabakalarını çıkarır
- Hafif viskoz formülü lubrikasyonu kolaylaştırır



2 Seal



- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.

Kanal Dolgu Patı

2 Seal EasyMix



- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.
- 2X15gr şırınga formu

Cortisol SP



- Prednisolon Asetat içerir
- Post operatif ağrının azaltılmasına yardımcı olur
- Radyopaktır
- Kök kanal dolgusu için ideal kıvamlıdır
- Herhangi bir renklendirme ajanı içermemesine rağmen, kendi rengi kanal girişini kolaylıkla görünür kılar.
- 25gr toz

Kök Kanal Dolgu Patı (Para-Formaldehyde içermeyen)

Sealite Ultra



- Ağrılı post operatif hassasiyet durumlarında endikedir.
- Post operatif ağrıyla önleyen Enoxolone içerir
- 25 gr toz, 11ml likit

Kök kanal için daimi dolgu simanı (%1 Non-steroidal Anti-inflamatuar ajan içeren)

Sealite Regular



- Kanallar içine tamamen yayılır
- Film kalınlığı çok incedir
- Kullanımı kolay
- Radyopaktır
- 25 gr toz, 11ml likit

Kök kanal için daimi dolgu siman (Anti-inflamatuar ajan içermeyen)

EndoREZ



- Hidrofilik doldurma özelliğine sahip ilk dolgu patı
- Birkaç saniye içinde doğrudan uygulama
- Hafif nemli kanallarda bile hermetik dolum
- Rezın tabanlı kor / kompozit materyallere bağlanır.
- Homojenik doldurma

Mta Caps



Kök kanal retreatment ve onarımı için mineral trioksit agregat içerikli siman

- Nemli ortamda dayanıklılığını koruyabilen olağanüstü bir kanal onarım materyali
- Cerrahi endodontik prosedürlerde bir retrograd dolgu malzemesi olarak kullanılan MTA Caps periradiküler iyileşmeye yardımcı olur
- Kanal perforasyonlarını onarır
- Apexfikasyon için ideal bir malzemedir.
- Tek seansta kalıcı bir apikal tıkaç oluşumunu sağlar.
- 2X0.3gr

M_{two} Paper Points



- Tam doygun uçlar ile güçlü bağlanma etkisi
- 18,20,22 mm lik derinlik işareti
- Enfeksiyon kontrolü için blister ambalaj
- Her blisterde 4 parça, 144 adet

M_{two} Guttapercha



- M_{two} NiTi Sistemine uygundur
- Sıcak ve soğuk obtrasyon tekniklerine uygun
- 60'lık kutularda

VDW[®] STERILE

VDW[®] STERILE



Sıcak Kanal Dolgu Cihazı



- Sıcak vertikal kondensasyon ile %90 başarı oranı
- Homojen ve sıkı dolgu
- Lateral kondensasyona göre daha hızlı dolgu restorasyonu
- Tek seansta adeziv restorasyon mümkündür.
- Diş kırıkları açısından minimum risk
- Kanal postlarının kolay yerleştirilmesi; istenilen seviye kadar dolum yapabilme imkanı
- Fazla gutta perchanın uzaklaştırma işlemini gereksiz kılar.

Kolay kullanım

- Downpack ve Backfill yöntemlerine ayrılmış kolay kullanım
- Tek tuşla kolay yönlendirme
- Bireysel ayarlanabilir parametreler
- Sık kullanılan parametreleri kaydedebilme
- 360° dönebilen el parçası



Gutta Cut



GuttaCut Kesici Uçlar



- Otoklava girebilir.
- 4'lü set halindedir (asorti)

- Kesici ucun halka şekli kaviteye kolay giriş sağlar ve fazla Guttapercha kanal ağzında kesilir
- Soğuk kalır ve düğmeye basıldığı anda uç hemen ısınır.
- Düğmeye basma bırakıldıktan sonra uç saniyeler içinde soğur.
- Sıcak kesim dolgu maddesinin yerinde gevşemesini önler.
- Hasta başına sadece kablosuz el parçası kullanılır.

TA-200 uçları değiştirilerek hem endodontik aktivatör hem de scaler olarak kullanılabilir.



Daha etkin ve hızlı endodontik tedavi




Kontrol edilebilir güç çıkışı

Model	TA-200-S4H	TA-200-S2H
Bağlantı Uyumu	MIDWEST 4 Hole	BORDEN 2 or 3 Hole
Frekans Aralığı	6,000 Hz	
Çalışma Basıncı	0,3 MPa (45 psi, 3,0 bar, 3,0 kgf / cm ²)	
Ağırlık	54 g	
Uzunluk	96 mm	

Canal Clean

Canal Clean, endodontik tedavide mutlak ve etkili kök kanal yıkamasına, aspirasyon ve kurutmaya izin verir. Kök kanalı etkin bir şekilde temizler, aspirasyon ve kurulum birkaç saniye içinde tamamlanır.

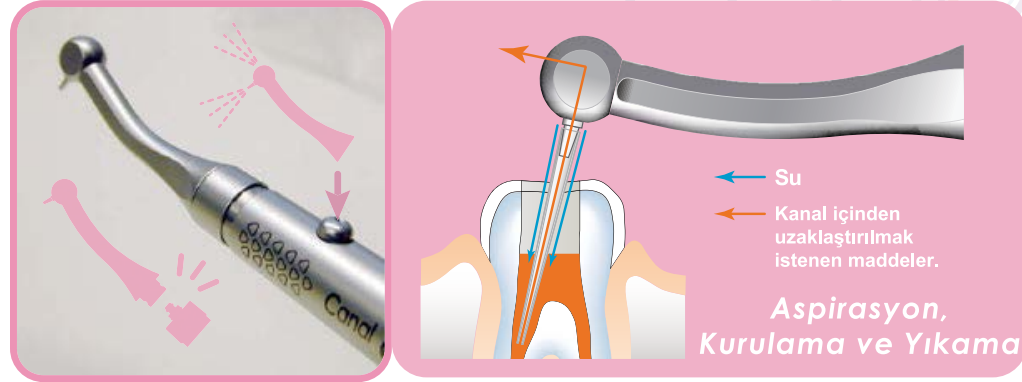

Özellikler

Model	Canal Clean -N4H / -S4H- N2H /-S2H
Uyumlu Cihazlar	Midwest 4-hole - Borden 2 or 3 - hole
Bağlantı Basıncı	0.2 to 0.4 MPa (29 to 58 psi, 2.0 to 4.1 kgf/cm ²)
Hava Basıncı	0 to 30 L/min (Coupling pressure of 0.3MPa)
Su Basıncı	20 mL/min (Water pressure of 0.2MPa)
Ağırlık	85 g (3.0 oz)
Uzunluk	152 mm(6.0 inch) - 148 mm(5.9 inch)

24'lü Refill Esnek Uç



IRRIGASYON



EDDY™

Sonic Powered Endo Irrigation

EDDY, 5000 – 6000 Hz aralığında Aircaler ultrasonic ve sonic cihazlarla (W&H ZA-55, NSK TI-Max S970, KaVo SONICflex 2003) kullanılabilen irrigasyon aktivasyon ucudur.

EDDY™

Her pakette 2 adet 5 blister

REF 1441 000 000



Consepsis Scrub

Klorheksidin Antibakteriyel Jel




- Postoperatif hassasiyeti azaltır
- Bond gücünü olumsuz etkilemez
- Sıçramayan bir formüle sahiptir
- Tek işlemden fırçalar, temizler ve dezenfekte eder

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.
Improving Oral Health Globally



NaviTip Sideport

Çift yandan perforeli irrigasyon iğnesi

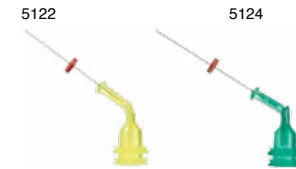

- NaviTip Sideport kapalı, küt kanül ucunun hemen arkasında iki irrigasyon yan portuyla mükemmel bir irrigasyon iğnesidir.

Endo-Eze Irrigator Tip

Tek yandan perforeli irrigasyon iğnesi




- Kimyasalların apekten taşma riski olmaksızın ideal iletilmelerini sağlar
- Eşsiz tıkanma önleyici uçlu, esnek ve küt bir kanüle sahiptir
- 27 ga (Ø 0,40 mm) Uç



Fibersite post-core sistemi
(Kendiliğinden korlu hazır post)

- Set ve Refill seçenekleri
- Uygulama kolaylığı
- 550 MPa basınca kadar dayanıklı.
- Frezleri 50 uygulamaya kadar kullanılabilir.
- Farklı bir simantasyon yöntemi gerekmez.
- Postlar otoklavlanabilir.
- Patentli İtalyan tasarımı
- 2-4-5 numara (3 farklı kalınlık) seçenekleri mevcuttur.

Video için Qr-Kod

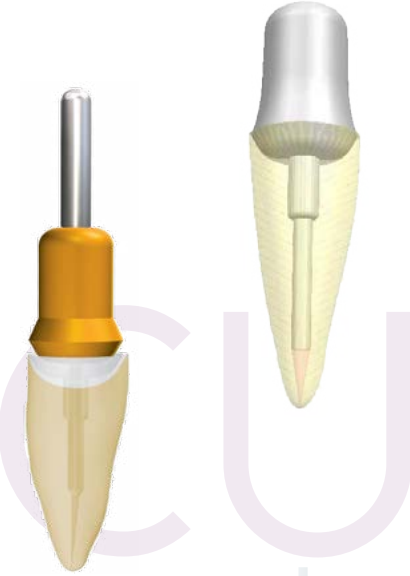

Cytec Post Seti



Fiberglass Titanyum ve Zirkonyum gibi elastik davranışı olan kemiğe en çok benzeyen maddedir. Bu nedenle kanal kökü postları ile kalan diş ve kompozit rekonstrüksiyon dayanıklılığını sağlayan biomekanik homojen bir yapı oluşturabilir.

Postlar hem silindirik hemde konik apikal kısım bulundurulur. Mikro sızdırmaz yüzeyi bulunan post sayesinde silanlama gerekmez.

- * Üst düzey dayanıklılık
- * Dentine benzer elastiklikten doğan homojenlik
- * Mikro sızdırmaz yüzeyi sayesinde güvenilir yapışma
- * Etkili ve keskin kesim frezleri
- * Yüksek radyoapasite

Cytec Post Refilleri



VDW System Box



- M_{two} eğelerinin kolay organizasyonu ve saklanması için, otoklava girebilen kutudur.

VDW Interim-Stand



- Tedavi sırasında aletlerin kolay temizliği ve muhafazası için

VDW Mini-Fix



- Endodontik aletlerin uzunluk ölçümü için

VDW Interim-Stand Refili



- Tek kullanımlık köpük diskler. (55 adet)

VDW Traning Tooth



- Endodontik eğitim için plastik diş.

airN GO
easy



- 360 derece dönebilen el parçası
- Tıkanmayı engelleyen, suyun ve tozun cihaz ucunda karışmasını sağlayan özel tasarım
- İsteğe bağlı satın alınabilen periodontal uç
- Hızlı ve doğru tedavi
- Kavo, Sirona ve Bienair cihazları için hazır uyumlu bağlantı.

Airflow Tozu



- Agresif olmayan geometrik yapı, yuvarlatılmış tanecikler (76µm)
- Sodyum bikarbonat bazlı
- %100 Doğal aromalı

Pearl



Ultra-aktif, kalsiyum karbonat bazlı (55µm)
Tuz diyeti olan hastalar için uygun

Perio




Glisin bazlı (25µm)
Periodontal ve peri-implantitis ile mücadelede yardımcı

airM ax



- Dahili su ısıtıcı** - su ısıtma sistemi sayesinde, hastalar için uygun sıcaklıkta su / toz karışımı
- Otomatik temizleme** - otomatik temizleme sistemi sayesinde tek tuş ile temizleme yapar ve istenmeyen tıkanmaları önler.
- Şeffaf toz haznesi** - Ne kadar toz kaldığını ve ne kadar dolduğu rahat bir şekilde takip edilebilir.
- Hızlı bağlantı** - basit ve hızlı kuplink bağlantısı

93/42 / EEC Direktifine göre sınıflandırma: Sınıf IIa
Boyutu: H = 110 mm x W = 250 mm x D = 300 mm
Ağırlık: 2.7 kg
Güç kaynağı: 100 240 V AC (50/60 Hz) için
Sınıf 1 tip BF cihazı
Güç tüketimi: 70 VA
İzolasyon: 4 kV (1 ms)
girişindeki su basıncı: 1.5 bar (14 PSI 72)
girişindeki hava basıncı: 4.5 bar (65 PSI 87)
girişinde Hava debisi: 10 lt / mn max
Çıkışta Su akış hızı: 0.120 ml / mn
Toz akış oranı: 1 ila 3 g / dak
Toz tankı kapasitesi: 50 g
Çalışma sıcaklığı: 10 ila + 40 ° C / 30-75% RH
Saklama / taşıma sıcaklığı: -40 ile + 70 ° C / 10% 100

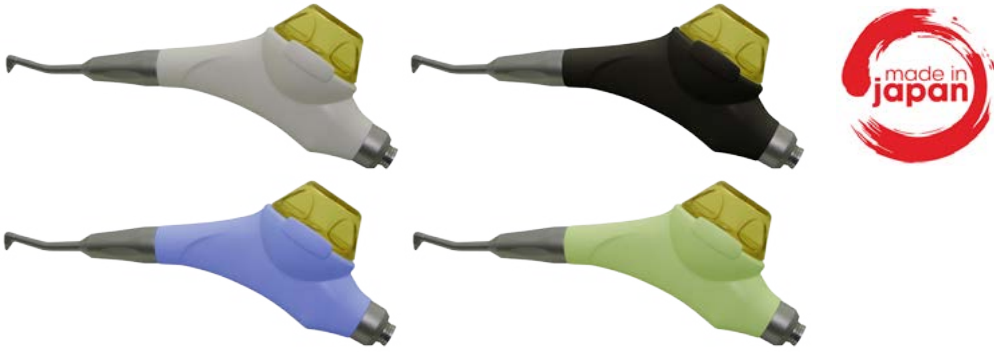

QUICK JET M dişin yüzeyinde oluşan sigara, çay ve benzeri lekeleri ve diş yüzeyindeki plakları kolayca temizler, beyazlatma ve parlatma işlemini kolayca gerçekleştirir. Verimli, kullanımı kolay ve diş dostu tasarıma sahip yardımcıdır.

AVANTAJLARI;

- * Ünite Monte Kompak Dizayn,
- * Tamamı Otoklavlanabilir,
- * Yeni Sistem Başlık Ucu İle Kolay Temizlik,

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.
Improving Oral Health Globally

Led Polimerizasyon Cihazı

VALO
CORDLESS

- Ultra yüksek enerjili geniş bantlı LED'ler tüm dental materyalleri sertleştirir
- Optimum iletilen ışın demeti tam ve homojen bir polimerizasyon sağlar
- Maksimum kullanılabilirlik için üç polimerizasyon modu – Standart, Yüksek Güç ve Xtra Güç
- Son derece dayanıklı, ince, ergonomik şekli tüm restorasyon alanlarına benzeri görülmemiş erişim olanağı verir
- Çevre dostu, güvenli, ucuz, şarj edilebilir pillerle çalışır
- Yüksek verimli LED'ler ve havacılıkta kullanılan alüminyum çubuk gövdesini dokunabilecek serinlikte tutar



Oral bakterilerin etkili dezenfeksiyonu

Hızlı, güvenilir ve kolay kullanım
Işıklı aktive edilen ve dişte leke yapmayan solusyonu (medikal sınıf tolyum klorür solusyonu 12.7 µg/ml) uygulayınız ve kırmızı LED ışık (635 nm) ile aktive ediniz. Bütün belirtiler için smart-pad etkili dezenfeksiyon sağlar Bakterilerin dış hücre duvarı seçici olarak tahrip edilir ve bakterilerin % 99.99'u kısa sürede yok edilir(max 2dk). Çoklu kullanımlarda bakteri direnci gelişmez Daha kısa tedavi süresi, tek seansta tedaviyi tamamlama olasılığı sağlar.

Endodonti

Hazırlanan kök kanalının dezenfeksiyonu / Tek seansta kök tedavilerinin tamamlanabilme olasılığı
Kronik iltihaplanmada azalma

Periodonti

Antibiyotik kullanmadan periodontal hastalıklarda destekleyici dokunun korunması / açık prosedürlere alternatif

Peri-Implant

İmplantasyon bölgesini etkili bir şekilde dezenfekte ederek yüksek maliyetli implant tedavilerinin korunması. Enfeksiyon durumlarında implant ve çevresinin mükemmel dezenfeksiyonu

Çürük

Minimum invazif işlem ile sert diş dokusunun korunması ve bu sayede remineralizasyonun desteklenmesi



Pa-on

Perio



hiç acı hissetmez.

- Bütün ölçüm yöntemleri yazılım sayesinde ayarlanabilir; her bir diş için ölçüm, resesyon, kanama indeksi gibi bu sayede her zamanki ölçüm yöntemleri değiştirilmek zorunda kalmaz. Ölçüm prosedürleri kullanıcıya göre bireysel olarak kaydedilebilir. Toplanan bilgiler havuzdaki konumundan yazılıma otomatik olarak taşınır ve hasta için görüntülenebilir.

- Periodontal Statü: Daha hızlı, standart ve yazılımı tamamen entegre edilmiş.
- Periodontal durumun tamamen otomatik şekilde değerlendirilmesi için ilk periometre. Periodontal hastalıkları artık daha kolay tanımlayabilirsiniz ve riskleri en aza indirebilirsiniz.
- Pa-on periodontal durumun kaydını kolaylaştırır ve standart hale getirir. Ölçümler anında periodontal çizelgede gözükür.
- Otomatik ve kontrollü ölçüm. Pa-on, yazılımı yardımı ile birlikte, periodontal durum ölçümünü otomatikleştirir. Önemli avantajları ise ölçüm sonuçlarını belgelemek için yardım gerektirmemesidir.
- Uygulama yazılımının içine tamamen entegre edilmiş. Ölçüm sonuçları direkt olarak byzz Paro'ya veya hesaplama yazılımına transfer eder. Artık ölçüm sonuçlarını elle kaydetmeye gerek yoktur; bulgular hemen periodontal çizelgede görüntülenir.
- Standartlaştırılmış ölçümler. -20 gramlık basınçla her zaman tam ölçümler. Hijyenik ve tek kullanımlık ölçüm ucu cep derinliği ölçümünü 20 gramlık bir basınçla yapmak üzere ayarlanmıştır. Bu kesin, standart ve transfer edilebilir sonuçlar sağlar. Periodontal durum kaydedilirken hasta

ACTEON Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
KÖK KANAL TEDAVİSİ ÜRÜNLERİ				
259304	Hycal	Kalsiyum hidroksit içerikli preperasyon ajanı, şırınga formu.	2 gr'lık şırınga	45,00 €
231201	Ededat	Kök kanal preperasyon solusyonu	14 ml şişe	28,00 €
266115	Salvizol	Kök Kanal İrrigasyonu EDTA	100 ml şişe	49,00 €
251160	Mta Caps	Kök kanal retreatment ve tamiri için mineral trioksit agregtat içerikli siman	0.30 gr lık kapsül	75,00 €
KÖK KANAL DOLGU MATERYALLERİ				
221606	Cortisolom Sp	Kök Kanal Dolgu Patı (Para-formaldehyde içermeyen)	25 gr toz	40,00 €
266264	Sealite Regular	Kök Kanal Dolgu Patı (Anti-inflammatory ajan içermeyen)	25 gr toz- 10 ml sıvı	79,00 €
266268	Sealite Ultra	Kök Kanal Dolgu Patı (%1 Non-steroidal antiinflammatory içeren) Ağrılı post operatif hassasiyet durumlarında endikedir.	25 gr toz- 10 ml sıvı	79,00 €
RETREATMENT ÜRÜNLERİ				
266112	Resosolv	Phenol-formalin esaslı kök kanal patı çözücü	14 ml şişe	30,00 €
AIR FLOW ÜRÜNLERİ				
	AirNGo Powder	Air Flow Tozu	250 gr	27,00 €
	AirNGo Easy	Air Flow Cihazı		1.300,00 €
	AirMax	Harici Airflow Cihazı		2.600,00 €
	Acteon Perio toz		160 gr şişe	50,00 €
	Acteon Pearl airflow tozu		250 gr	45,00 €
	AirNGo Perio Kit		Airflow cihazı+ Perio Toz	450,00 €

ORANGE DENTAL Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
	LOUPE OPT-ON SUN	2.7x TTL		1.450,00 €
	LOUPE OPT-ON SUN	3.3x TTL LOUPE		1.550,00 €
	VARIO CLIPS	LOUPE AKSESUARİ		135,00 €
	LOUPE - GÖZLÜK ADAPTÖRÜ	LOUPE AKSESUARİ		95,00 €
	SPOT-ON NXT	LOUPE IŞIK KAYNAĞI		890 €
	SMART PAD	DEZENFEKSİYON CİHAZI		2.990,00 €
	PA-ON	PERIODONTİ ÖLÇÜM CİHAZI		3.250,00 €

VDW Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
	M _{two} Files	Kanal Eğesi	4'lu	36,00 €
	M _{two} Guttapercha	Gutta Perka		15,00 €
	M _{two} Paper Points	Paper Point		12,00 €
	Retreatment Files	Yenileme Eğesi		54,00 €
	C Pilot Files	Kanal Eğesi		18,00 €
V041010000002	VDW File Care Edta	Edta Jel	2X3 ml	19,00 €
V041010000005	VDW File Care Edta	Edta Jel	5X3 ml 5'li	80,00 €
V041020000000	2 Seal	Kanal Dolgu Patı		76,00 €
V041025000001	2 Seal Easymix Şırınga Refili	Kanal Dolgu Patı	2 şırınga	220,00 €
V040239000000	M2 Instrument	Ensturman Kutusu		50,00 €
V040495000000	Interim Stand	Eğe Standı		20,00 €
V040179000000	VDW MiniFix	Eğe Ölçer		30,00 €
V040547000040	Beefill Heat Pluggers	Beefill Uçları		110,00 €
V040548000000	Beefill Thermal Response Tipyok	Pulpa Test Ucu		150,00 €
V040532053045	Beefill Kartuşları	Kartuş	10'lu	68,00 €
V040511000000	Gutta Cut Hand Piece	EL PARÇASI		110,00 €
V040512000150	Gutta Cut Cutting	TIPS KESİCİ UÇ		34,00 €
V041103000000	Vdw Gold Reciproc Cihazı	ENDOMOTOR		2.650,00 €
V041153000000	Vdw Silver Reciproc Cihazı	ENDO MİKROMOTOR		1.650,00 €
V040145000511	Raypex 5 Apex Locator	APEX BULUCU		990,00 €
V040541000000	BeeFill 2 in 1	SICAK GUTA CİHAZI		2.500,00 €
V040143000000	Gutta Cut	GUTTA KESİCİ		180,00 €
	Kendo Files	KENDO KANAL EĞELERİ		6,00 €
	FlexiCut			9,00 €
	Lentulo			7,00 €
	Barbed			6,00 €
	Eddy			52,00 €
VDW Gold ve Silver Reciproc Yedek Parçalar				
1079 000 000	Angulduruva			716,00 €
1107 000 512	Angulduruva Silikon Kılıf			70,00 €
1107 000 514	Dudak Klipsi			85,00 €
1107 000 515	Eğe Klipsi			85,00 €
1177 000 516	Dudak Klipsi Kablosu Klipsi İle			62,00 €
1107 000 519	Kanal Ölçüm Kablosu			61,00 €
1107 000 517	Şarj Cihazı			68,00 €
1107 000 510	Ayak Pedalı			95,00 €
Raypex 5 Yedek Parçalar				
0141 000 501	Şarj Cihazı			48,00 €
0141 000 506	Ölçüm Kablosu			78,00 €
0141 000 514	Dudak Klipsi			79,00 €
0141 000 515	Eğe Klipsi			75,00 €

Wand Dental Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
	The Wand Anestezi Cihazı			1.450,00 €
	The Wand 50'lik Anestezi Uygulama Ucu			200,00 €

EDS Dental Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
5421	Başlangıç Seti			790,00 €
5421-04	6'lı Ege			79,00 €
5400-01	Guttaperka			29,00 €

MICRON Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
MC-QJM/X	Quick set M Air Flow cihazı			830,00 €
TA-200S2H	Scaling + endo TA-200-2H			490,00 €
TA-200S4H	Scaling + endo TA-200-4H			490,00 €
CCN-2H	Canal Clean-2H			490,00 €
CCN-4H	Canal Clean-4H			490,00 €
5034131	Flexible tube for Canal Clean-N (21 mm)	24 adet		24,00 €

MegaDental Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
MD MK2	Fibersite Post 2 Numara Set			60,00 €
MD MK2D	Fibersite 2 Numara 10'Lu Re I			45,00 €
MD MK4	Fibersite Post 4 Numara Set			60,00 €
MD MK4B	Fibersite 4 Numara 10'Lu Re I			45,00 €
MD MK5	Fibersite Post 5 Numara Set			60,00 €
MD MK5A	Fibersite 5 Numara 10'Lu Re I			45,00 €

Alpha Endo Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
AE001	Alpha Endo			1.650,00 €

W&H Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
12923000	Kablosuz Endo Set Eb-300/ Entran			1.112,00 €

GoodDoctor's Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
	GoodDoctor's Neo Apex Locator			580,00 €

Ultradent Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
UD F29030	Endo-Eze Genius Endodontic Motor	1 x Genius motor, 1 x El aleti , 1 x Ayak pedalı, 1 x Güç Kablosu		1.990,00 €
UD 4056	Genius 8:1 Angliruva Ege	25mm 25-30-35/4		653,00 €
UD 3747 A 3749A-3751A	Genius Reciprocation Ege	21 mm		89,00 €
UD 3753A	Genius Reciprocation Ege	25 mm		89,00 €
UD 3755A	Genius Reciprocation Ege	25 mm 40		89,00 €
UD 416	Ultra-Blend Plus Refill	4 x 1,2 ml (1,64 g) Dentin Şırınga		62,00 €
UD 417	Ultra-Blend Plus Refill	4 x 1,2 ml (1,64 g) Opak Şırınga		62,00 €
UD 1016	Ultra-Blend Plus Mini Kit			39,00 €
UD 1454	Navitip Fx 25 mm 20 Pk			44,00 €
UD 5122	Navitip 31G 21 mm 50 Pk Sarı -Yeşil			87,00 €
UD 5124	Navitip 31G 27 mm 50 Pk Sarı -Yeşil			87,00 €
UD 233	Sable Seek Kit	4 x 1,2 ml (1,22 g) şırınga 20 x Black Mini Brush Tip		49,00 €
UD 329	Sitrik Asit %20 Solüsyon InDispense Refill	1 x 30 ml (31,26 g) şırınga		27,00 €
UD 5900	EndoREZ Kit			103,00 €
UD 689	Consepsis Scrub InDispense Refill	1 x 30 ml (47,31 g) şırınga		80,00 €
UD 730	Consepsis Scrub Kit	4 x 1,2 ml (1,89 g) şırınga, 2 x STAR brush, 20 x White Mac Tip		32,00 €

Hahnenkratt Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
HK 43600	Cytec Post Seti			106,00 €
HK 43 4360R	Cytec Post Refill No: 1-2-3-4			42,00 €

Ticaret Sicil No : 454096
Ticaret Ünvan : Öncü Dental Tıbbi Malzeme İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi : Oğuzhan Cd. No:45 Fındıkzade / İstanbul / Türkiye
Merkez Telefon : 444 66 28 - +90 212621 51 40(pbx)
Merkez Faks : +90 212 523 39 49
Şube Adresi : Kavaklıdere Mh.Bankacı Sk.No:16/17 Çankaya / Ankara / Türkiye
Şube Tel : +90 312 466 99 23 - 24 -25
Şube Faks : +90 312 467 00 52

İnternet Sitesi : <http://www.uncudental.com>
İnternet Sitesi İp No : 79.171.16.65
Mersis No : 0656012179800016
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
İstanbul No : 34/TCSM/232-0
Mesul Müdür : Ömer Aydın e-Posta : oaydin@uncudental.com
Ankara No : 06/TCSM/6175-911
Mesul Müdür : Muhammed Ceylanoglu e-Posta : mceylanoglu@uncudental.com

Her hakkı Öncü Dental A.Ş.'ye aittir.
İzinsiz içeriği değiştirilemez, kopyalanamaz ve çoğaltılmaz.
Katalog içerisindeki ürün fiyatları KDV HARIÇ fiyatlardır.
Katalog içerisinde kullanılan ürün görselleri ile ürünün kendisi değişiklik gösterebilir.
Katalog içerisindeki yazı ve görsellerin basım hatasından kaynaklanabilecek yanlışlıklarda
Öncü Dental A.Ş. sorumlu tutulamaz



Öncü Dental 2017-2018 Endodonti Kataloğu

Adres : Oğuzhan Cd. No:45 Fındıkzade / İstanbul / Türkiye
Tel : 0212 621 51 40 (PBX) | Faks : 0 212 523 39 49
Adres : Kavaklıdere Mh.Bankacı Sk.No:16/17 Çankaya / Ankara / Türkiye
Tel : 0 312 466 99 23 - 24 -25 | Faks : 0 312 467 00 52
www.uncudental.com | info@uncudental.com