

2023

dentac®
feel the innovation



ÜRÜN KATALOĞU





WELCOME To dentac

Türk diş hekimliği sektöründe 25 yıllık tecrübemizle ve ülkemize olan sevgimiz ve inancımız ile yaptığımız çalışmalara ara vermeden tüm hızıyla devam etmekteyiz. Bu bağlamda **DENTAC** markamız ile diş hekimlerinin ihtiyaçları karşılamak üzere pek çok diş hekimliği malzemesi üretip, diş hekimliği sektörünün hizmetine sunuyoruz. Türkiye'de üretilen **DENTAC** dental ürünlerini hem iç piyasa hem de küresel pazara sunarak Dünya diş hekimliği malzemeleri pazarında da yer edinmeye başlamaktayız.

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, **DENTAC** markamızın portföyünü her geçen gün daha fazla çeşitlendirmekteyiz. Markamız özellikle Endodonti ve Restoratif tedaviler için ihtiyaç duyulan ürünleri içeren portföyü ile öne çıkmaktadır. Tedavi süresini kısaltan tedavi protokolleri ile güçlendirilmiş endodontik ürün portföyü ve tamamen Türkiye'de üretilen Restoratif ürünlerden oluşan portföyümüz, siz diş hekimlerine en iyi kaliteyi sunmak için oluşturulmuştur.

Tüm ürünlerimizi standartlara uygun olarak üretmek en temel hedefimizdir. Çalışmalarımıza ara vermeden tüm hızıyla devam etmekteyiz. Farklı ürünler ile verdiğimiz hizmeti geliştirmek üzere ilerleyen günlerde sizlerle yeni ürünlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

DENTAC

Tendo®

Must Resiprokal NiTi K�k Kanal EĖesi	5
Mis Rotasyonel NiTi K�k Kanal EĖesi	6
Proendo Rotasyonel NiTi K�k Kanal EĖesi	7
H-Files K-Files	7
Gutta Percha Paper Points	8
Bioserra Biyoseramik K�k Kanal Dolgu Pati	9
Sealart Rezin Bazlı K�k Kanal Dolgu Pati	10
Fillart Geici Restoratif Dolgu Materyali	11

Tresto

Parion Nano Hibrit Restoratif Kompozit	13
Parion Flow Akışkan Restoratif Kompozit	13
Myra Mikro Hibrit Restoratif Kompozit	14
Pergamon Posterior Restoratif Kompozit	14
Triobond �niversal Bond	15
Micro Applicator Mikro Uygulama Fırçası	15
Easy Matrix	16
Easy Retainer	16
Transparent Matrix Bandı	17
DentaClear	17
Artik�lasyon KaĖıdı 200�	18
Artik�lasyon KaĖıdı 80�	18
Artik�lasyon KaĖıdı 80� (Nal)	18

Ttool

Otomatik Kron-K�pr� S�k�c�	20
�l� KaşıĖı	20
Dental Muayene Seti	21
Cerrahi Sakşın Ucu	21
Cerrahi Implant Seti	21

Tprotective

T-Maske Cerrahi Maske 3S-CLA-IIR	23
Ultraface Tam Y�z Koruma Siperligi	24
Foldaface Tam Y�z Koruma Siperligi	24
Goggleface Tam Y�z Koruma Siperligi	24



www.dentac.com

QR Code

Online Catalog



Portatif Ağız Duşu

- ✓ Dental plak oluşumu ve ağız kokusunu engeller.
- ✓ Geleneksel temizleme yöntemlerine kıyasla, Waterfloss ağız duşu, diş aralarındaki kalıntıları etkili bir şekilde temizler.
- ✓ Kolay kullanım ve hızlı bir temizlik sunar.



Diş aralarında biriken yemek artıkları ve bakterilerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar.

dentac[®]
feel the innovation

Tendo® | Ready For
Endo



Must | Resiprokal NiTi Kök Kanal Eğesi

"Multi Use Single Technique"



Kolay Şekillendirme

**tek eğe sistemi ile kolay şekillendirme *T-endo Must size tek bir eğe ile kök kanalını şekillendirme imkanı sunar*

T-endo Must, Resiprokal sistemi ile döner sistemlere göre şekillendirmede daha fazla zaman kazanmanızı sağlar. Bu nedenle kırılmaya karşı da daha dayanıklı olabilir.

T-endo Must eğelerinin yüksek kesim verimliliği ile daha kısa sürede şekillendirme sağlar.

TM-Wire ısıtım işlem teknolojisi sayesinde, T-Endo Must eğeleri en kavisli kök kanallarında bile esnektir.

Steril

Siz ve hastanızın güvenliği için steril blister

Kullanıma hazırdır, ilk kullanımda paketi açıldıktan sonra herhangi bir sterilizasyon işlemine gerek yoktur.



"tg" en dar kök kanalları için ideal çözüm.

Kare kesit tasarımı sayesinde TG hızlı ve etkin bir glide path tecrübesi sağlar.

must™
multi use single technique



21mm

25mm

31mm

DC20310

DC30310

DC40310

DC20325

DC30325

DC40325

DC20340

DC30340

DC40340

DC20350

DC30350

DC40350

MUST ASSORTED BLISTER pack of 4 instruments

ASS (1x tg, 1x m25, 1x m40, 1x m50)

DC20301

DC30301

DC40301

Mis | Minimal Invasiv Şekillendirme



Steril

"Minimal Invasive Shaping"

Düşük konisite açılı ile apikal şekillendirirken periservikal dentinden minimum madde kaldırarak korumayı hedefler.


Doğal kanal anatomisine saygı.

MİS kanal eğeleri kesme verimliliğinden ödün vermeden eğeyi daha esnek hale getiren özel ısıtma işlemi sayesinde doğal kanal anatomisini sorunsuz bir şekilde takip eder.

TM Wire özel ısıtma işlemi teknolojisi.


Kullanıma hazır steril paket ile kullanım öncesi sterilizasyon adımına gerek kalmaz.

Döngüsel Yorulma Testi

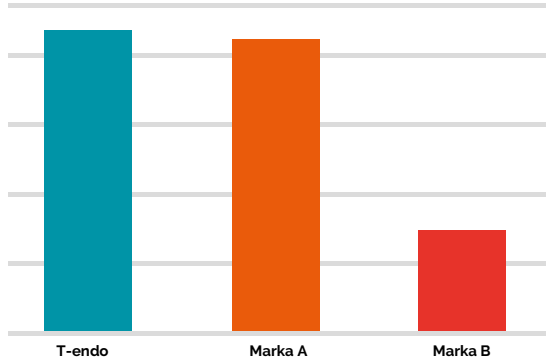

Dünyanın önde gelen Dental Kanal Eğesi markaları ile karşılaştırılmıştır.

Döngüsel Direnç Testi

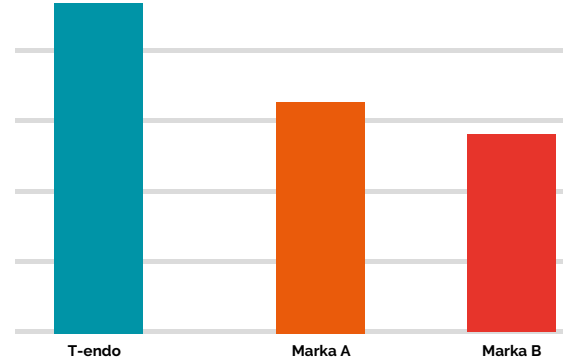

Dünyanın önde gelen Dental Kanal Eğesi markaları ile karşılaştırılmıştır.

mis
minimal invasive shaping

		16mm	21mm	25mm	31mm
Orificer	25.09	DC314OR			
Glider	15.04		DC21415	DC31415	DC41415
Shaper	20.05		DC21420	DC31420	DC41420
Finisher	25.04		DC21425	DC31425	DC41425
Finisher+	25.06		DC21425+	DC31425+	DC41425+
FinisherS	30.04		DC21430	DC31430	DC41430
FinisherM	35.04		DC21435	DC31435	DC41435
FinisherL	40.04		DC21440	DC31440	DC41440

Mis ASSORTED BLISTER pack of 4 instruments

AsortedS (25.09, 15.04, 20.05, 25.04)	DC21401	DC31401	DC41401
AsortedL (25.04, 30.05, 35.04, 40.04)	DC21401+	DC31401+	DC41401+
Asorted+ (25.09, 15.04, 20.05, 25.06)	DC21411	DC31411	DC41411

Proendo | Rotasyonel Niti Kanal Eğesi



Steril

"Baştan sona mükemmel esneklik"

Proendo konvansiyonel 6'lı eğe sistemi.
TM Wire ısıtım işlem teknolojisi ile geliştirilmiştir.

Yüksek kırılma direnci kazandırılan Proendo üstün kesme etkinliği ve progresif konik tasarımı ile olağanüstü performans sergiler.

PSx, PS1, PS2 başlangıç eğeleri şekillendirmek için geliştirilmiştir.
PF1, PF2, PF3 eğeleri bitiş için geliştirilmiştir.

Proendo

19mm

21mm

25mm

31mm

PSX1



DC35419

PS1



DC25418-02

DC35418-02

DC45418-02

PS2



DC25420-04

DC35420-04

DC45420-04

PF1



DC25420-07

DC35420-07

DC45420-07

PF2



DC25425-08

DC35425-08

DC45425-08

PF3



DC25430-09

DC35430-09

DC45430-09

H-Files



Endodontik El Eğesi H Files, paslanmaz çelik telden yapılmıştır.

- Taper ile birlikte yiv derinliği artar, daha keskin, daha esnek bir enstrüman haline gelir.
- ISO numarası ürünün sapında açıkça belirtilmiştir.
- 6 adetlik blister formundadır.

H-Files

21mm

25mm

31mm

15.40

DC2821-01

DC2825-01

DC2831-01

45.80

DC2821-02

DC2825-02

DC2831-02

06

DC2821-06

DC2825-06

DC2831-06

08

DC2821-08

DC2825-08

DC2831-08

10

DC2821-10

DC2825-10

DC2831-10

15

DC2821-15

DC2825-15

DC2831-15

20

DC2821-20

DC2825-20

DC2831-20

25

DC2821-25

DC2825-25

DC2831-25

30

DC2821-30

DC2825-30

DC2831-30

35

DC2821-35

DC2825-35

DC2831-35

K-Files



- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- K-Files tıkalı kanalları kolaylıkla geçer.
- Arttırılmış esneklikleri sayesinde kök kanalının eğrisini sorunsuz bir şekilde takip edecek şekilde tasarlanmıştır.
- ISO numarası ürünün sapında açıkça belirtilmiştir.
- 6 adetlik blister formundadır.

K-Files

21mm

25mm

31mm

15.40

DC2921-01

DC2825-01

DC2831-01

45.80

DC2921-02

DC2825-02

DC2831-02

06

DC2921-06

DC2825-06

DC2831-06

08

DC2921-08

DC2825-08

DC2831-08

10

DC2921-10

DC2825-10

DC2831-10

15

DC2921-15

DC2825-15

DC2831-15

20

DC2921-20

DC2825-20

DC2831-20

25

DC2921-25

DC2825-25

DC2831-25

30

DC2921-30

DC2825-30

DC2831-30

35

DC2921-35

DC2825-35

DC2831-35

Gutta Percha



Radyoopak çizgilere sahiptir.

Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.

T-endo gutta perkalar 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır 60 ve 120'li kayan kaset.

T-endo Must	.4 Tapered	.6 Tapered	Assorted
DC11133	DC11130	DC11131	DC11144
DC11138	DC11132	DC11135	
DC11150	DC11134	DC11137	
	DC11136	DC11139	
	DC11148	DC11151	
	DC11142	DC11149	
		DC11143	

Paper Points



Steril

Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.

T-endo paperpointler 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır 60 ve 120'li kayan kaset.

T-endo Must	.4 Tapered	.6 Tapered	Assorted
DC11123	DC11120	DC11121	DC11145
DC11128	DC11122	DC11125	
DC11146	DC11124	DC11127	
	DC11126	DC11129	
	DC11152	DC11147	
	DC11140	DC11153	
		DC11141	

Bioserra | Biyoseramik Kök Kanal Dolgu Patı



"Yüksek akışkanlık, kolay uygulama"

Biyoaktif ve biouyumlu


PH 12 değerine sahiptir ve böylece doku dostudur.

Kalsiyum silikat, kök kanalındaki çevre dokulardan nemi emerek ve Kalsiyum Hidroksit'in ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) bir miktar kristalleşmesini sağlayarak CAH(Kalsiyum Alüminat Hidrat) jeli ve CSH(Kalsiyum Silikat Hidrat) jeli üreterek iyileşmeye ciddi katkı sağlar.


2 gr. şırınga.

10 adet tek kullanımlık uç.


Seyreltilmemiş

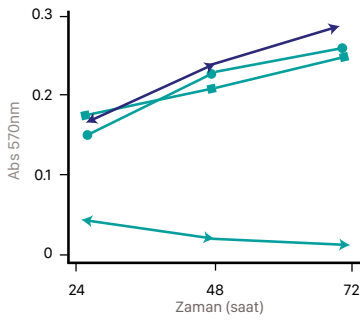

Seyreltilmiş 1:2


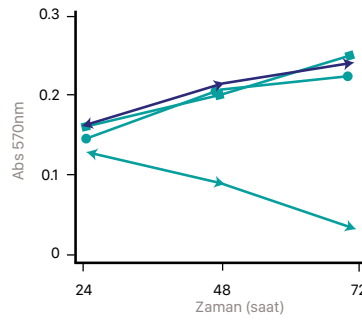


Seyreltilmiş 1:4

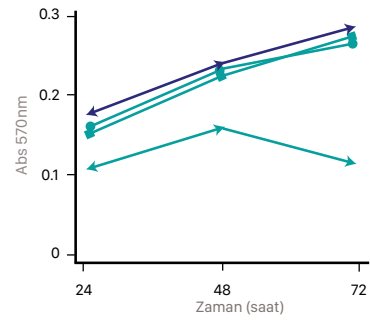

— sealart — kontrol — Firma B — Firma A

T-Endo sealart PH (12.73) değeri yüksek olmasına rağmen, zamanla hücrelerin hızla çoğaldığını göstermekte ve kanıtlamaktadır. Bu nedenle anlaşılacağı üzere, insan vücuduna zararsız olması ile beraber, mükemmel biouyumluluğu bulunmaktadır.

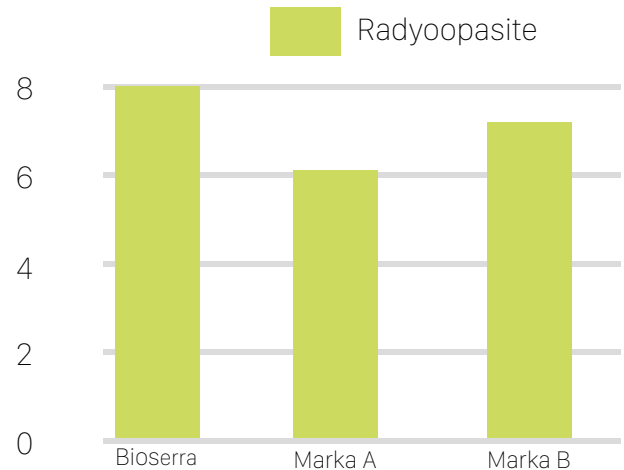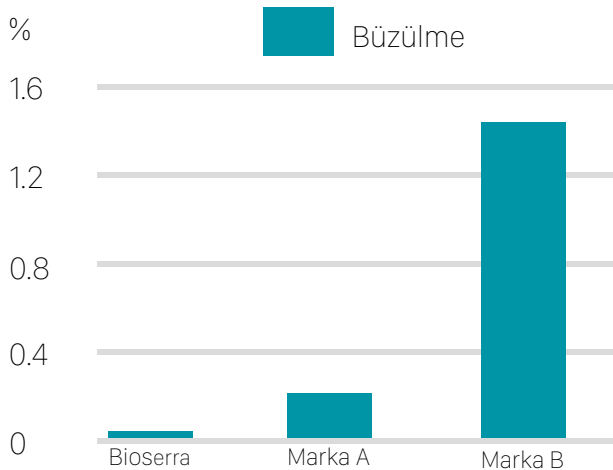

Kod

DC11113

Ürün

T-endo Bioserra 2gr.

Sealart | Rezın bazlı kök kanal dolgu patı



"Kalıcı kök kanal sızdırmazlığı sağlar."

Doku sıvılarında çözünmez.
Mükemmel biyoyoumluluğa sahiptir.
Hermetik sızdırmazlık özelliği kök kanal tedavisinin başarısını arttırmaktadır.


Sealart, ikili şırınga tipi olan epoksi reçine esaslı bir kök kanal patıdır.

Son derece mükemmel sızdırmazlık özelliği ve biyoyoumluluk dahil olmak üzere olağanüstü bir kimyasal ve fiziksel özelliğe sahiptir.


13.5 gr ikili şırınga.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler


Akışkanlık

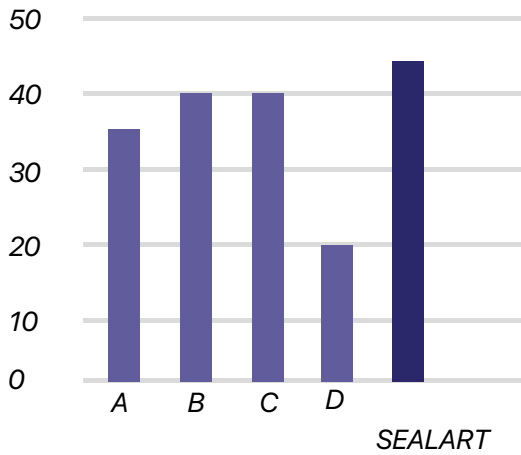


Çözünürlük

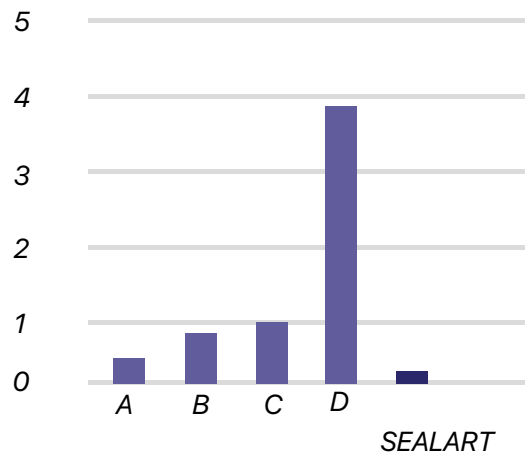

Radyo Opasite

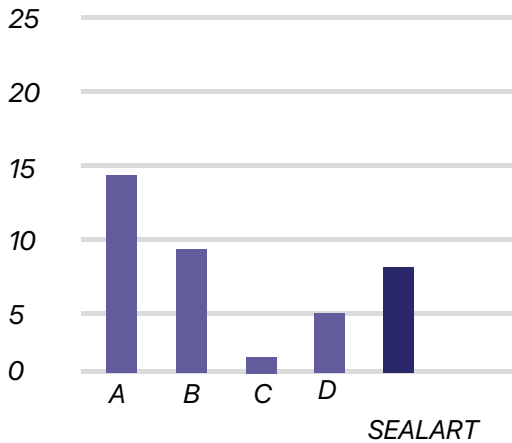

Yüzey Geçirgenliği

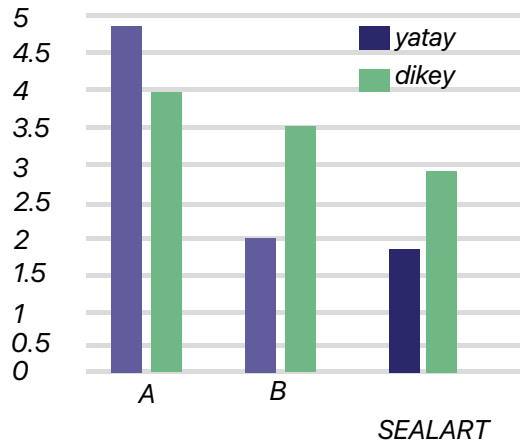

Kod

DC11112

Ürün

T-endo Sealart 13.5gr

Fillart | Geçici Restoratif Dolgu



Kavitede mükemmel stabilite


Geçici dolgu materyali.

Kolay uygulama ve çıkarma.

Optimum ezilme gücü.

40 gr.

Donma Zamanı

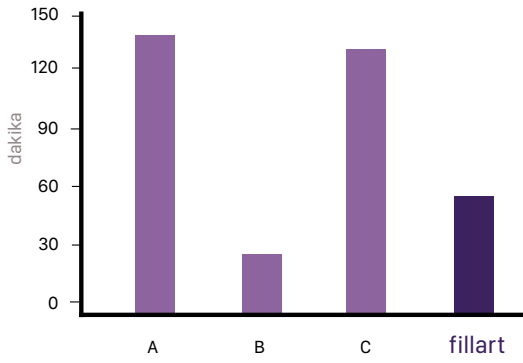

Kod

DC11114

Ürün

T-endo Fillart 40gr

Tendo®
ready for endo
must™
multi use single technique

ONE FILE CANAL SYSTEM



Tresto | Dental Art
Beyond Era



Parion | Nanohibrit Restoratif Kompozit



"Çağın Ötesinde Diş Sanatı "

Kanıtlanmış renklenme direnci, dayanıklılık, hızlı ve kolay cilalama.

Parion, hem direkt hem indirekt restorasyonlar için Nanohibrit teknolojisine sahip, ışıkla sertleşen, radyoopak, üniversal bir kompozittir.

Anterior ve posterior bölgede estetik restorasyonlara imkan veren kolay manipülasyon.

Restoratif doldurma işlemlerinde kusursuz çözümler sunar.

Parion Flow | Akışkan Restoratif Kompozit



Mükemmel adaptasyon, cila retensiyonu ve aşınma direnci

Çok çeşitli endikasyonlar ve teknikler için çok yönlüdür. Mükemmel işleme özelliği, basit cilalanabilme ve yüksek yüzey sertliği uzun süreli tedavi başarısını destekler.

Kod

DC711

DC701

Ürün

T-resto Parion 4gr

T-resto Parion Flow 2X2gr

Myra | Mikrohibrit Restoratif Kompozit



Myra, anterior ve posterior dişlerin restorasyonu için mikrohibrit bir kompozittir. Kıvamı ile basit uygulama ve kolay malzeme yerleşimi sağlar.

Üst düzey dolduruculuğa ve mikrosertliğe sahip olması "Myra" kompoziti rakiplerinden ayırıştırır.

Anterior ve posterior bölgede kullanıma imkan veren kolay manipülasyon özelliği ile tedavilerinizde fark yaratır.

Pergamon | Posterior Restoratif Kompozit



İdeal kullanım vadederken, hızlı uygulama tekniği ve üstün fiziksel özellikler sunan bir posterior kompozittir. Kıvamının sert olması okluzal yüzeyin şekillendirilmesinde ve kontakt noktalarının oluşturulmasında kolaylık sağlar.

Kod

DC711

DC701

Ürün

T-resto Myra 4gr

T-resto Pergamon 4gr

Triobond | Universal Bond



"Bağlanma gücünü keşfet"

Tek şişe tek aşama

Triobond, selective-etch, self-etch ve total etch teknikleriyle kullanılabilen universal dental adezivdir.

triobond, polimerizasyon büzülmesi ve fonksiyon sırasında oluşan kuvvetlere karşı koyabilir.

Biyolojik uyumluluğu yüksektir.

Kuru ve nemli yüzeylere bağlanabilir.
Özel silikon şişe tasarımı sayesinde tek tek eşit damla verir.

Uygulamada asit gerektirmez fakat diğer tüm universal bondlarda olduğu gibi anterior uygulamalarda harici asit kullanımı ile bağlanma kuvveti artar.

Dentin tübüllerine mükemmel penetre olarak post operatif hassasiyet riskini ortadan kaldırır.

Micro Applicator | Mikro Uygulama Fırçası



Kolay kullanım.

Üniversal.

Ergonomik.

100 adet mikro uygulama ucu.

Kod

DC705



DC901-902

Ürün

T-resto Triobond 5ml

T-resto Uygulama Fırçası İnce-Normal

Easy Matrix

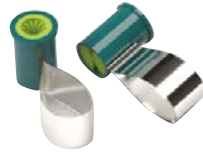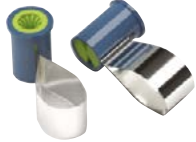

İdeal kontakt açıları ve 0.040 mm kalınlığı ile mükemmel adaptasyon.

Easy Matrix 3.0 5.0mm (mavi-molar) ve 6.3mm (yeşil-pre molar) seçenekleri ile daha kolay kontak oluşturmanızı sağlar.

En iyi sonuçlar için Dentac Easy Retainer ile kullanılması tavsiye edilir.

Easy Retainer



"Alüminyum gövde ve güçlü iç mekanizması ile patentli tasarım."


Kolay Kullanım.

EasyMatrix ile mükemmel uyum.

İzolasyon için hızlı çözüm.

Patentli teknoloji.

Güvenilir tasarım.

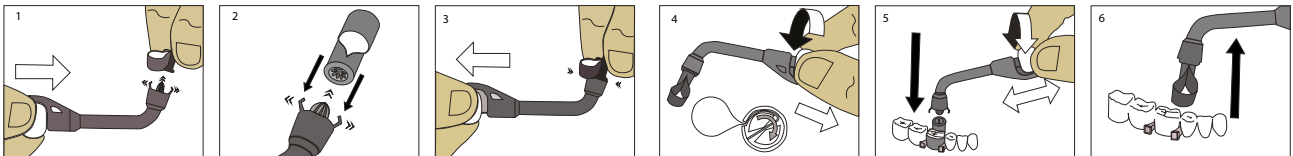

Kod

Ürün

DC1051-52-64-65 T-resto Easy Matrix (0.040 -0.050mm)-(5-6,3mm)

DC1100

T-resto Easy Retainer

Transparan Matris Bandı



Şeffaf polyester materyalden üretilmiş matris bantları ile kompozit dolguların kolay şekil alması amaçlanmıştır.

İdeal kontak noktaları için esnek olarak tasarlanmış matris bandı, ışık geçirme özelliği sayesinde dolgu esnasında kompozit materyalinin direk ışık almasını ve kolayca polimerize olmasını sağlar.

10 mm genişliğe ve 97 mm uzunluğa sahip bant, standart tüm matris aletleri ile uyumludur.

100 adet seffaf matris bandı.

DentaClear



Diş taşı temizliğinden sonra, minenin ve dolguların parlatılmasında kullanılır. Minenin parlatılmasında mekanik abrazyon etkisi bulunur.

Doğal aroma içerikli.

Kolay çalkalanabilir.

Gluten içermez.

340 gr.

Çilek ve Nane aromalı.

Kod

DC1010

DC6001

Ürün

T-resto Transparent Matris Bandı

T-resto DentaClear 340gr

Artikülasyon Kağıdı Düz 200µ



Yüksek renk verme kapasitesine sahip özel esnek kağıt malzeme, oklüzal yüzeylere tam ve hassas bir şekilde uyum sağlar.

Progresif yapısı sayesinde, kapanış esnasındaki temas noktalarını ve özellikle aşırı yük binen noktaların tespitini sağlar. 200µ inceliğindeki kağıt materyal, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir.

Kırmızı ve mavi renk seçeneği.

Artikülasyon Kağıdı 80µ



Sadece 80µ inceliğindeki kağıt materyal, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir. Kağıdın bir tarafı mavi, diğer tarafı kırmızı renktedir. Böylelikle basıncın alt veya üst çeneden kaynaklanan temas noktalarının ayırt edilebilmesi kolayca sağlanmaktadır.

Kolay kullanım.

Su geçirmez.

Çift taraflı, çift renkli (Kırmızı ve Mavi).

Hassas uyum.

144 çift taraflı renkli artikülasyon kağıdı.

Artikülasyon Kağıdı 80µ (nal)



Sadece 80µ inceliğindeki kağıt materyal, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir. Kağıdın bir tarafı mavi, diğer tarafı kırmızı renktedir. Böylelikle basıncın alt veya üst çeneden kaynaklanan temas noktalarının ayırt edilebilmesi kolayca sağlanmaktadır.

Kolay kullanım.

Su geçirmez.

Çift taraflı, çift renkli (Kırmızı ve Mavi).

Hassas uyum.

Kod

DC8001-8002

DC8080

DC8090

Ürün

T-resto Artikülasyon Kağıdı 200

T-resto Artikülasyon Kağıdı I Form

T-resto Artikülasyon Kağıdı U Form

T^otool



Otomatik Kuron-Köprü Sökücü



Kuron ve köprülerin ağız içerisinden kolaylıkla çıkarılabilmesi için tasarlanmıştır.

Ergonomik olarak tasarlanan cihaz ile vurma şiddeti minimumdan maksimuma yedi kademe olacak şekilde ayarlanabilir. Böylelikle, diş hekimlerinin istediği güç seviyesi ile kolayca kuron veya köprüyü yerinden çıkartması hedeflenmiştir.

Tetikli sistemi sayesinde kontak noktası kaybedilmeden vurma işlemi tekrarlanabilir.

Ölçü Kaşığı



Ağız içinden ölçü almak üzere kompakt olarak tasarlanan ölçü kaşıkları farklı boy ve modellere sahiptir.

Disli, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Dissiz, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Kenedy; ön dişli arka dişsiz, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Anatomik; 2 alt - Dönerli, köprü kaşığı

Disli, deliksiz; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Kod

DC5900

DC1000

Ürün

T-tool Otomatik Kuron-Köprü Sökücü

T-tool Ölçü Kaşığı

Muayene Kiti



Muayenehanelerde pratik kullanım amacıyla hazırlanmış orak sont, ayna ve ayna sapı ile preselden oluşan 3'lü settir.

4 numara ayna ve klasik ayna sapı, ucu ideal kıvrımlı en çok tercih edilen orak model sont ile klasik tip preselden oluşan muayenehanelerin vazgeçilmez yardımcısıdır.

Surgitip | Tek Kullanımlık Cerrahi Aspiratör Ucu



Tek kullanımlık cerrahi aspiratör ucu

Standart çap 2.5 mm / 4.8 mm.
100 adet tek kullanımlık cerrahi aspiratör ucu.
5 adet çift adaptör.

Cerrahi Implant Set



Cerrahi tedaviniz için sterilize edilmiş tek kullanımlık set.

- 1 adet 75x75 alet masa örtüsü.
- 1 adet 75x85 hasta üst örtüsü.
- 2 adet şeffaf hortum kılıfı.
- 2 adet 10x15 reflektör tutacağı.
- 1 adet tıbbi atık torbası.
- 5 adet 5x5 spanç.
- 4 adet kelepçe.
- 1 adet el kurulama havlusu.

Kod

DC2000

DC910

DC2090

Ürün

T-tool Dental Muayene Seti

T-tool Surgitip

T-tool Cerrahi İmplant Set

Tprotective | Beyond Protection, Be Safe



T-Maske Cerrahi Maske 3S



- 3 katman
- Tam ultrasonik şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske boyutu 18x10 cm
- Steril değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 95
- EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Tip I
- FDA Level 1

T-Maske Cerrahi Maske CLA



- Yüksek filtrasyonlu 3 katman
- Tam ultrasonik şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske boyutu 18x10 cm
- Steril değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 98
- EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Tip II
- FDA Level 2

T-Maske Cerrahi Maske IIR



- Yüksek filtrasyonlu 3 katman
- Tam ultrasonik şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske boyutu 18x10 cm
- Steril değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 99
- EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Tip IIR
- FDA Level 3

Kod

DC2031

DC2022

DC2023

Ürün

T-protective T-Maske Cerrahi Maske 3S

T-protective T-Maske Cerrahi Maske CLA

T-protective T-Maske Cerrahi Maske IIR

Ultraface | Tam Yüz Koruma Siperligi



- Tam yüz koruma
- İç mekan ve açık havada günlük kullanıma uygundur
- Kristal Clear özelliği sayesinde net görüş imkanı verir
- Ultra hafif sadece 25 gr
- Kullanımı kolay ve pratiktir
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı
- Mükemmel görüş sağlar
- Hava akışı ve konfor için havalandırılmalı tasarım
- Gözlükle kullanılmaya uygundur
- Farklı renklerde lastik bantlı seçenekleri bulunur
- Tekrar kullanılabilir
- Siperlik kısmı 28x20 cm ölçülerindedir
- Sosyal iletişimi engellemez.

Foldaface | Tam Yüz Koruma Siperligi



- Günlük kullanıma uygun (dış mekan dahil)
- 180° katlanabilir siperlik
- Yeniden kullanılabilir çerçeve ve hızlı değiştirilebilen tek kullanımlık siperlik
- Gözlüklerle kullanıma uygun
- Çizilmelere karşı dayanıklı
- 1 çerçeve ve 5 kalkan - 3 çerçeve ve 15 kalkan kutu seçeneği
- Tam yüz koruması
- Sis ve çizilmeye karşı dayanıklı, sınırsız görüş sağlar
- Hızlı ve kullanımı kolay
- 4 renk farklı renk seçeneği

Goggleface | Tam Yüz Koruma Siperligi



- Gözlük tasarımı
- Zarif görünüm
- Günlük kullanıma uygun
- Tam yüz koruması
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Kullanıcı dostu tasarım
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
- Ultra hafif 16 gr
- 5 siperlik ve 1 çerçeve - 25 siperlik ve 5 çerçeve kutu seçeneği
- Gözlük ile kullanılabilir

Kod

Ürün

DC2020

T-protective Ultraface Siperlik

DC2010

T-protective Foldaface Siperlik

DC2030

T-protective Goggleface Siperlik



dentac[®]
feel the innovation

oncu
dental
Yeni Yılımız Kutlu Olsun

www.dentac.com

dentac[®]
feel the innovation